

**Goat Anti-Mouse IgG, FITC Conjugated**  
**山羊抗小鼠 IgG (H+L), FITC**

产品名称: 山羊抗小鼠 IgG (H+L), FITC

目 录 号: EK013

保存条件: -20℃ 保存。

规 格: 100ul

免 疫 原: 小鼠 IgG


缓 冲 液: 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

稳 定 剂: 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)。

防 腐 剂: 0.05%叠氮钠。

荧 光 团: FITC, Amax = 492 nm; Emax = 520 nm

应用范围: Immunofluorescence 1:50-1:200

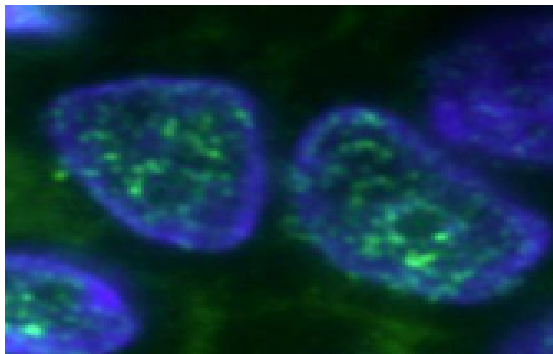

Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) - Goat polyclonal Secondary  
Antibody to Mouse IgG - H&L (FITC) EK013

## 产品简介

本产品为 FITC 标记的经亲和纯化的山羊抗体，特异识别小鼠 IgG，检测灵敏度高，本底低，常用于免疫荧光和流式细胞等标记检测。

## 注意事项

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释，现用现配。
2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。
3. 避免使用含有苯二胺的封片剂，因为会导致荧光变弱和扩散。
4. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。