



Goat Anti-mouse IgG, HRP Conjugated
山羊抗小鼠 IgG (H+L), HRP

产品名称: 山羊抗小鼠 IgG (H+L), HRP

目录号: EK010

保存条件: -20℃保存。

规格: 100ul

免疫原: 小鼠 IgG

缓冲液: 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6


稳定剂: 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)。

防腐剂: 无 (叠氮钠是 HRP 抑制剂, 抗体稀释液中请避免使用叠氮钠作为防腐剂)。

应用范围: Western Blot 1: 2000-50000

ELISA 1: 5000-100000

IHC 1: 200-5000

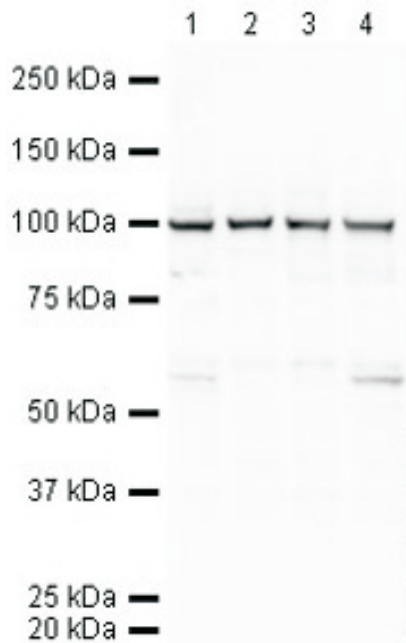

Western blot -山羊抗小鼠 IgG (H+L), HRP (EK010), **All lanes** : Goat polyclonal Secondary Antibody to Mouse IgG - H&L (HRP) (EK010) was used at 1/5000 dilution developed using the ECL technique, with ab86741

产品简介

HRP (Horseradish Peroxidase) 即辣根过氧化物酶, 可以催化 DAB、TMB 等底物显色或催化 ECL 等化学发光试剂产生化学反应而发光。本产品为辣根过氧化物酶标记的经亲和纯化的山羊抗体, 特异识别小鼠 IgG, 检测灵敏度高, 本底低, 对其他种属 IgG 无明显交叉反应, 可用于 Western Blot、ELISA 和免疫组化检测。

注意事项

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释, 现用现配。
2. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度。
3. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗。