

**beta- Actin Rabbit Polyclonal Antibody**

**beta –Actin 兔多克隆抗体**

产品名称: beta –Actin 兔多克隆抗体

目录号: NC 011

保存条件: -20℃, Avoid freeze / thaw cycles.。

规格: 100ul

免疫原: beta actin Fusion Protein

抗体类型: 兔多克隆抗体 IgG

浓度: 60ug/100ul

缓冲液: PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3


分子量: 43KD

应用种属: 人、小鼠、大鼠、猴、斑马鱼

应用范围: WB: 1:2000-1:10000

IHC: 1:20-1:200

IF/ICC : 1:50-1:500

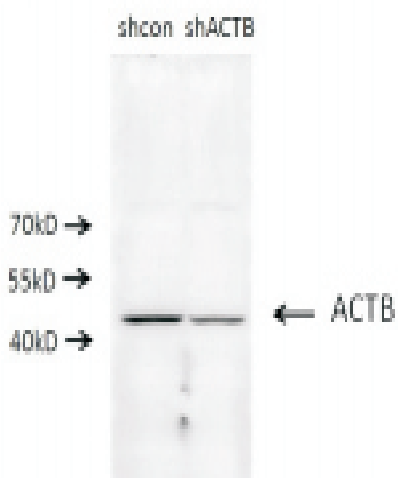

Beta-actin 兔多克隆抗体(NC011)检测 A549 cells (shcontrol and shRNA of Beta actin), 1:500

## 产品简介

$\beta$ -Actin 是横纹肌纤维中的一种主要蛋白质成分，也是肌肉细丝及细胞骨架微丝的主要成分。具有收缩功能，分布广泛，分子量为 43 kDa，具有高度保守性，在细胞中的表达相对稳定，因此它常被用于校正系统的内参。

## 注意事项

1.  $\beta$ -Actin 在心肌和肾脏细胞中表达低，不适用于心肌或肾脏细胞表达水平的参照。
2. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。
3. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。