



Donkey Anti-Goat IgG, HRP Conjugated

驴抗山羊 IgG (H+L), HRP

产品名称: 驴抗山羊 IgG (H+L), HRP

目录号: EK030

保存条件: -20℃ 保存。

规格: 100ul

免疫原: 山羊 IgG

缓冲液: 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6


稳定剂: 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)。

防腐剂: 无 (叠氮钠是 HRP 抑制剂, 抗体稀释液中请避免使用叠氮钠作为防腐剂)。

应用范围: Western Blot 1: 2000-50000

ELISA 1: 5000-100000

IHC 1: 200-5000

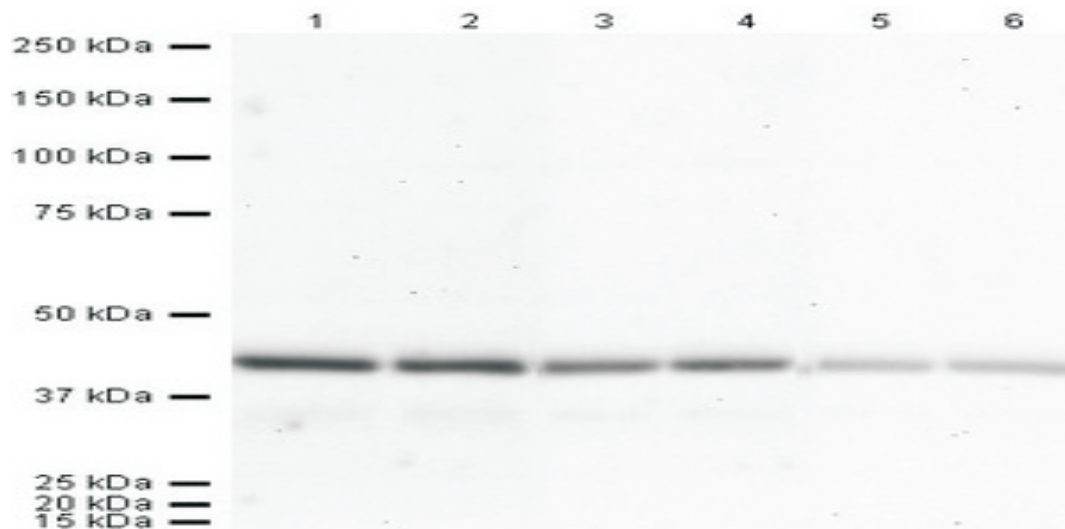

Western blot - Donkey polyclonal Secondary Antibody to Goat IgG - H&L (HRP) (EK030)

All lanes : Anti-beta Actin antibody (ab82229) at 1 µg/ml and HeLa (Human epithelial carcinoma cell line) Whole Cell Lysate at 20 µg per lane.

Secondary

Lanes 1 - 2 : Donkey polyclonal Secondary Antibody to Goat IgG - H&L (HRP) (EK030) at 1/2000 dilution

Lanes 3 - 4 : Donkey polyclonal Secondary Antibody to Goat IgG - H&L (HRP) (EK030) at 1/5000 dilution

Lanes 5 - 6 : Donkey polyclonal Secondary Antibody to Goat IgG - H&L (HRP) (EK030) at 1/20000 dilution

Developed using the ECL technique

Exposure time : 20 minutes

西安壮志生物科技有限公司

www.zhuangzhibio.com

产品简介

HRP (Horse Radish Peroxidase) 即辣根过氧化物酶, 可以催化 DAB、TMB 等底物显色或催化 ECL 等化学发光试剂产生化学反应而发光。本产品为辣根过氧化物酶标记的经亲和纯化的驴抗体, 特异识别山羊 IgG, 检测灵敏度高, 本底低, 对其他种属 IgG 无明显交叉反应, 可用于 Western Blot、ELISA 和免疫组化检测。

注意事项

1. 使用本产品时, 请使用 5% 的正常驴血清作为封闭液, 避免使用 BSA 或奶粉稀释抗体。
2. 使用时应按所需的浓度进行稀释, 现用现配。
3. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度。
4. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗。

订购电话: 029-82520312-801

订购邮箱: info@zhuangzhibio.com