

Donkey Anti-Goat IgG, FITC Conjugated 驴抗山羊 IgG (H+L), FITC

产品名称: 驴抗山羊 IgG (H+L), FITC

目 录 号: EK033

保存条件: -20℃保存。

规 格: 100ul

免 疫 原: 山羊 IgG


缓 冲 液: 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

稳 定 剂: 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)。

防 腐 剂: 0.05%叠氮钠。

荧 光 团: FITC, Amax = 492 nm; Emax = 520 nm

应用范围: Immunofluorescence 1:50-1:200

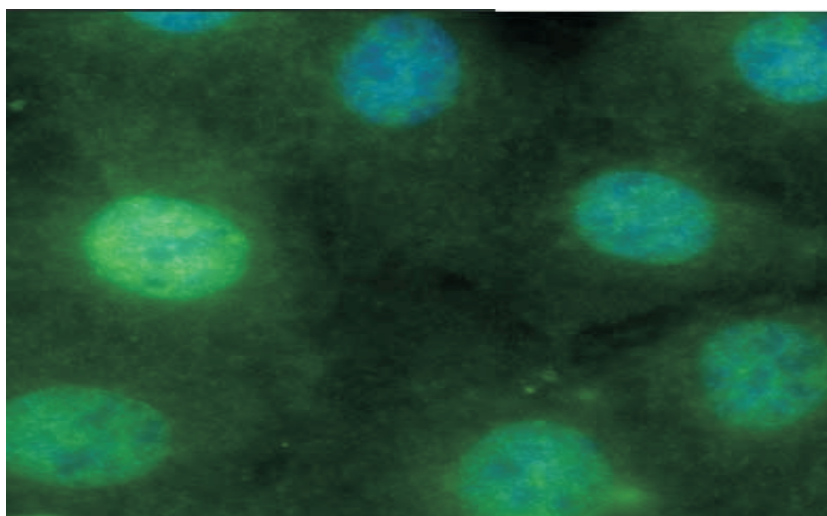

EK033 was used at dilution 1/500 with the primary antibody Anti-Calcein A antibody in ICC/IF.



产品简介

本产品为 FITC 标记的经亲和纯化的驴抗体，特异识别羊 IgG，检测灵敏度高，本底低，常用于免疫荧光和流式细胞等标记检测。

注意事项

1. 使用本产品时，请使用 5% 的正常驴血清作为封闭液，避免使用 BSA 或奶粉稀释抗体。
2. 使用时应按所需的浓度进行稀释，现用现配。
3. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。
4. 避免使用含有苯二胺的封片剂，因为会导致荧光变弱和扩散。
5. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。